

Acupoints

Masážní podložka na nohy se stimulátorem EMS



Masážní EMS podložka na nohy Acupoints

Využití pro ošetření nohou, masáž akupunkturních bodů, aktivaci žil a zmírnění únavy.

masážní režim: 8 druhů: (masáž, hnětení, škrábání, tlak, akupunktura, baňkování, aktivace, tvar).

intenzita masáže: 19 stupňů

velikost podložky: 32,5 x 29,5 cm

Důležité informace

**POUŽÍVEJTE POUZE PODLE POKYŇŮ.
TOTO NENÍ ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK
POSKYTNUTÉ INFORMACE NENAHRAZUJÍ
RADU LÉKAŘE NEBO POSKYTOVATELE
ZDRAVOTNÍ PÉČE.**


Vlastnosti produktu

Nízkofrekvenční léčba

Provádí se rytmem a měkkými impulzy. Nízká frekvence je speciální elektřina s pravidelným rytmem nebo zastavením. Podle vhodné síly a rychlosti působí na tělo nízká frekvence v pravidelném rytmu. Měkkost nízké frekvence je stejná jako masáž lidskou rukou.

- Výběr z 8 režimů v 19 úrovních (intenzita 1-19).

- Když zapomenete vypnout napájení, po 15 minutách od zastavení se automaticky vypne.

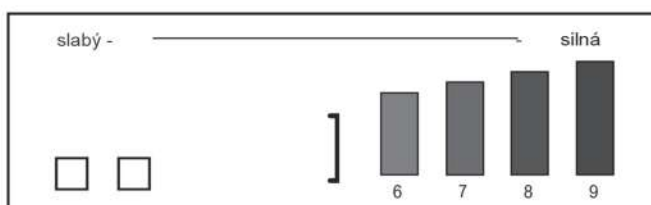

Poznejte EMS masážní přístroj na nohy

Hlavní zařízení (ze předu)

Hlavní zařízení (ze zadu)



Co je technologie Ems?

Elektrická stimulace svalů (EMS), známá také jako neuromuskulární elektrická stimulace (NMES), vyvolává svalové kontrakce pomocí elektrických impulsů. Impulzy napodobují akční potenciál vycházející z centrálního nervového systému a způsobují kontrakci svalů. EMS se ukázala jako poměrně účinný proaktivní nástroj pro posilování svalů.

K čemu se používá systém EMS?

- Posilování svalů
 - Rehabilitační účely
 - Zabránění atrofii svalů
- Zvýšení lokální cirkulace krve a uvolnění

Doporučená doba použití na jednu partii je 15 minut/jednou denně. Snížením intenzity lze prodloužit životnost baterie.

Pro první použití nastavte nižší intenzitu. Po přizpůsobení se nízké intenzitě ji prosím upravte.

Návod k použití



**Vybírejte z 8 režimů
v 19 úrovních
(intenzita 1-19)**



Když stiskne tlačítko "zapnutí" a "zvyšování intenzity", obrazovka se postupně zapne.

Když stiskne tlačítko "vypnout" a "snížit intenzitu", obrazovka se postupně vypne.

- Tlačítko pro "zapnutí" a "stoupající intenzitu", "vypnutí a "klesající intenzitu" rozděljuje intenzitu do 19 tříd.
- Tlačítko pro volbu režimu nabízí 8 režimů (masáž, hnětení, škrábání, tlak, akupunktura, baňkování, aktivace, tvar).

Varování

Nepoužívejte tento výrobek na následující části, jinak by mohlo dojít k nehodě nebo kožním problémům.

- Okolní části, jako je hrudník a rameno (hlava obličej atd.)
- Rány, oči, ústa, sliznice pochvy, atd.
- Na jednu část opakovaně během jednoho dne
- Kovové a plastové místo implantátu
- Na páteř

Nepoužívejte tento výrobek na následující části.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přístroj používat
Nepoužívejte tento přístroj, pokud máte tyto kontraindikace!

- U všech krvácivých stavů
- Poškozená kůže
- Během těhotenství a nebo menstruace
- Infarkt myokardu
- Srdeční onemocnění, srdeční selhání
- V opilosti, při nadměrné únavě
- Horečnaté stavy
- Lokální hnisavé infekce
- Poruchy krevní srážlivosti a tenké vlasečnice

Obecné bezpečnostní informace

Tato jednotka EMS by nikdy neměla být používána k maskování nebo zmírnění nediagnostikované bolesti. Před léčbou jakýchkoli příznaků bolesti byste se měli poradit se svým lékařem. Pro vaše bezpečné a správné používání přístroje, doporučujeme vám, abyste si před jeho použitím přečetli celý příbalový leták.

Preventivní opatření

*Používejte nízkou intenzitu a kratší dobu trvání, abyste svaly nepřetížili a vyhnuli se stimulaci.

*Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

*Tento výrobek není vodotěsný. Nevkládejte jej do vody ani neumývejte vodou.

*Přípravek nepoužívejte, pokud máte výron nebo zranění na chodidle, kotníku, achillovce nebo lýtku.

Další důležitá bezpečnostní opatření

1. Tento přístroj používejte pouze pro účely fyzikální terapie.
2. Používejte pouze příslušenství dodané s podložkou pod nohy.
3. Nepoužívejte tento přístroj v místech s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
4. Nepřetěžujte elektrickou zásuvku.
5. Pokud se přístroj porouchá, odpojte jej od zdroje napájení a kontaktujte zákaznický servis. Nepokoušejte se přístroj opravit sami, protože tím ztrácíte záruku.
6. Nedovolte, aby se zařízení dostalo do kontaktu s kovovými předměty, jako je spona opasku nebo šperky.

Technické specifikace

Funkce	Masážní přístroj na nohy EMS
Použití režimu	8 režimů
Úroveň intenzity	19 úrovní
Napětí	DC 3V
Výstup	Maximálně 9,8 mA
Navrhovaná teplota používání prostředí	Přibližně 15-35 C
Automatické vypnutí	15 minut
Frekvence	1 ~ 100 Hz
Typ baterie	Nabíjecí kabel USB
Velikost	32X29cm
Příslušenství	1 Hlavní zařízení 1 podložka pod nohy 1 Uživatelská příručka 1 Nabíjecí kabel USB